

ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

С СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ

ATLANT

ХФ-1006-001*

*Конструкция системы мониторинга компании РБ

ТУ ВУ 100010198.100-2024, изм. №1

Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения
Республики Беларусь № ИМ-7.116436 от 10.10.2024



СИСТЕМА РАВНОМЕРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

OPTIMA COOLING

Предназначен для хранения лекарственных препаратов,
лекарственных средств, промежуточного хранения
компонентов крови и изделий медицинского назначения



от +1
до +10°C

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТТАИВАНИЯ

PHARMACEUTICAL

2 года 10 лет

ГАРАНТИИ

СРОК СЛУЖБЫ

ЗАО «АТЛАНТ», УНП 100010198



Полки металлические переставляемые



Четыре металлических решетчатых полки, регулируются по высоте



Полки выдерживают нагрузку до 20 кг (при равномерном распределении)

НОВИНКА



Механический замок с ключами



Дверь холодильника можно закрыть
ключом на замок




В комплект входят два ключа



Удобная удлиненная ручка позволяет
открывать дверь без малейших усилий

НОВИНКА

Точная установка температуры с шагом в 1 °C

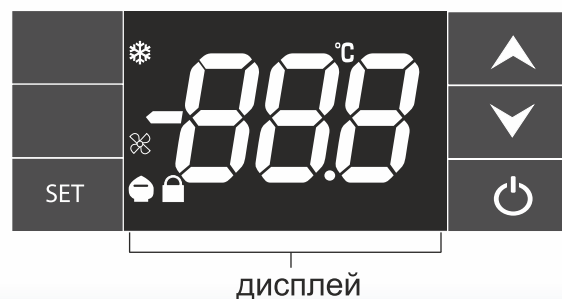

Кнопки управления

-  – кнопка увеличения значения;
-  – кнопка уменьшения значения;
-  – кнопка включения (выключения) холодильника/выключения блокировки / выход из меню;
- SET** – вход в меню / подтверждение выбора

Индикаторы

-  – индикатор работы компрессора;
-  – индикатор работы вентилятора;
-  – символ температуры;
-  – включена блокировка кнопок;
-  – включение режима выбора

Диапазон возможного выбора температуры:

от +2 °C до +10 °C

НОВИНКА



Экономия ресурсов



Минимум затрат

Объем энергопотребления холодильника минимален при его эксплуатации



Экономичность

Номинальное суточное энергопотребление при температуре окружающей среды $+25^{\circ}\text{C}$ и температуре в отделении $+8^{\circ}\text{C}$ не более 2,8 кВт·ч

НОВИНКА



СИСТЕМА РАВНОМЕРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

OPTIMA COOLING

Встроенный тангенциальный вентилятор обеспечивает принудительную циркуляцию воздуха в камере, благодаря которому температура равномерно распределяется по всему внутреннему объему холодильника, даже при его полной загрузке.

Охлаждение и восстановление в отделении оптимальной температуры при частом открывании двери происходит в три-четыре раза быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха



Система автоматического оттаивания

Созданы оптимальные условия для хранения, принцип работы основан на классическом физическом явлении — конденсации

НОВИНКА



Магнитная вставка в уплотнителе



Плотное прилегание двери

Для плотного прилегания двери к корпусу холодильника по периметру двери предусмотрен уплотнитель со специальной магнитной вставкой



Антибактериальная защита

В составе уплотнителя допускается применение антибактериальной добавки



Уплотнитель сменный

Если Вы захотите обновить уплотнитель, его нужно будет предварительно заказать на сайте atlant.by на странице отдела




НОВИНКА




Устойчивость к перепадам напряжения

Холодильник ATLANT сохраняет свою работоспособность при перепадах напряжения **от 175 до 255 В** в электрической сети* благодаря **Volt Security** — системе безопасной эксплуатации при перепадах напряжения, обеспечивающей стабильную работу холодильника.

* Холодильник должен эксплуатироваться в диапазоне номинальных напряжений от 220 до 230 В в электрической сети переменного тока при отклонении напряжения $\pm 10\%$ от номинального и частотой (50 ± 1) Гц.

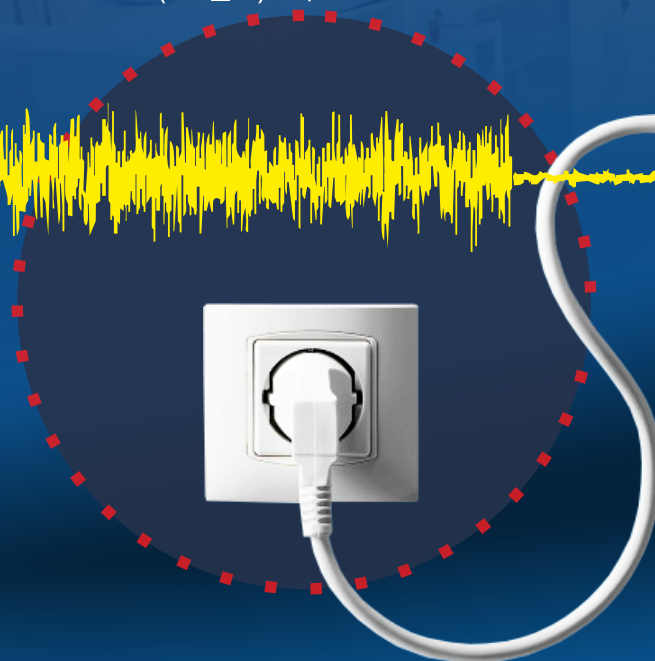

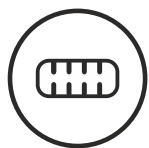

Датчик температуры электронного блока управления

Согласно температурной карте измерений фармацевтического холодильника ХФ-1006-001, при температуре окружающей среды $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ и установке на блоке управления $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$: максимально низкая средняя температура ($-0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$) зафиксирована у задней стенки на нижней полке, максимально высокая средняя температура ($+5,1\text{ }^{\circ}\text{C}$) зафиксирована у передней стенки на нижней полке.




Датчик температуры
электронного
блока управления



Система мониторинга температуры



Термометр
с выносным датчиком

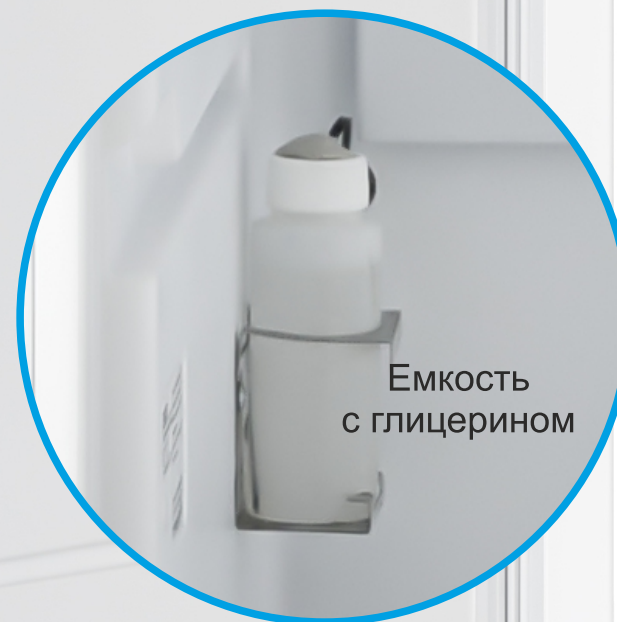

Емкость
с глицерином

Выносной датчик термометра
заводится внутрь холодильника
в емкость с глицерином



Низкий уровень шума

ATLANT стремится сохранить комфорт в каждой ситуации, разрабатывая продукцию с низким уровнем шума.

Уровень шума фармацевтического холодильника не превышает 60 дБ.

Он не будет создавать помехи для работы персонала в помещении, где располагается холодильник.



Использование современного экологически чистого хладагента

Фреон R134a – тетрафторэтан – сжиженный газ, не обладающий токсичными свойствами, с легким запахом эфира, не имеющий цвета.

R134a не токсичен в связи с отсутствием брома и хлора и их соединений в составе, не воспламеняем, экологически безопасен, имеет нулевой озоноразрушающий потенциал ($ODP=0$), низкий потенциал глобального потепления ($GWP=1300$).

Физические свойства фреона позволяют повысить работоспособность и возможности холодильного оборудования.





ХФ-1006-001

**ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
(ТУ ВУ 100010198.100-2024, изм. №1)**

Количество компрессоров, шт	1
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1845x705x574
Номинальный общий объем брутто, дм ³	410
Номинальный полезный объем, дм ³	400
Площадь полок для хранения, м ²	1,2
Средняя температура полезного объема, °С	от +1 до +10*
Климатический класс	УХЛ 4.2**
Номинальное суточное энергопотребление при температуре окружающей среды +25 °С и температуре в отделении +8 °С, кВт·ч / сутки, не более	2,8
Масса нетто, кг, не более	70
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	60
Максимальная допустимая нагрузка на полку, кг	20
Номинальная потребляемая мощность, Вт	300
Хладагент	R134a

* ХФ-1006-001 Предназначен для хранения лекарственных препаратов, лекарственных средств, промежуточного хранения компонентов крови и изделий медицинского назначения.



СРОК
СЛУЖБЫ

- Стабильная работа при напряжении от 175 до 255 В
- Доступное сервисное обслуживание
- Гарантийный срок эксплуатации холодильника 2 года



Качество, проверенное временем!



Современная техника

Холодильники фармацевтические ХФ-1006-001 – это современная техника ATLANT, в которой реализован ряд новых технических решений



Широкая сеть сервисных организаций

Сервисное обслуживание не требует покупки дорогих деталей и запчастей, поэтому считается бюджетным



Узкий сегмент

ХФ-1006-001 эксплуатируется в отапливаемых помещениях учреждений здравоохранения, торговых объектах аптечных сетей, пунктах вакцинации и иных помещениях с температурой окружающей среды от +16 до +25 °С



Система мониторинга температуры с выносным датчиком



Электронный блок управления с LED-дисплеем



Самодиагностика



Индикатор отклонения температуры



Тангенциальный вентилятор



Статическая система охлаждения



Магнитная вставка в уплотнителе



Устойчивость к перепадам напряжения



Датчик температуры электронного блока управления



Замок с ключами



Полки металлические переставляемые



Низкий уровень шума



R134a Экологически чистый хладагент



Звуковая сигнализация

от +1
до +10°C

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ATLANT

Актуальную информацию о нашей продукции и новостях компании Вы можете найти на сайте atlant.by и на аккаунтах компании ATLANT в социальных сетях.



www.vk.com/atlantbt



www.ok.ru/atlantbelarus



www.facebook.com/atlantbt



www.youtube.com/atlantbt



www.instagram.com/atlant_belarus/

info@atlant.by

